





MODE İMPLANT EXOCAD KÜTÜPHANE YÜKLEME REHBERİ




- Mode implant internet sitesine giriniz


<https://modeimplant.com/>

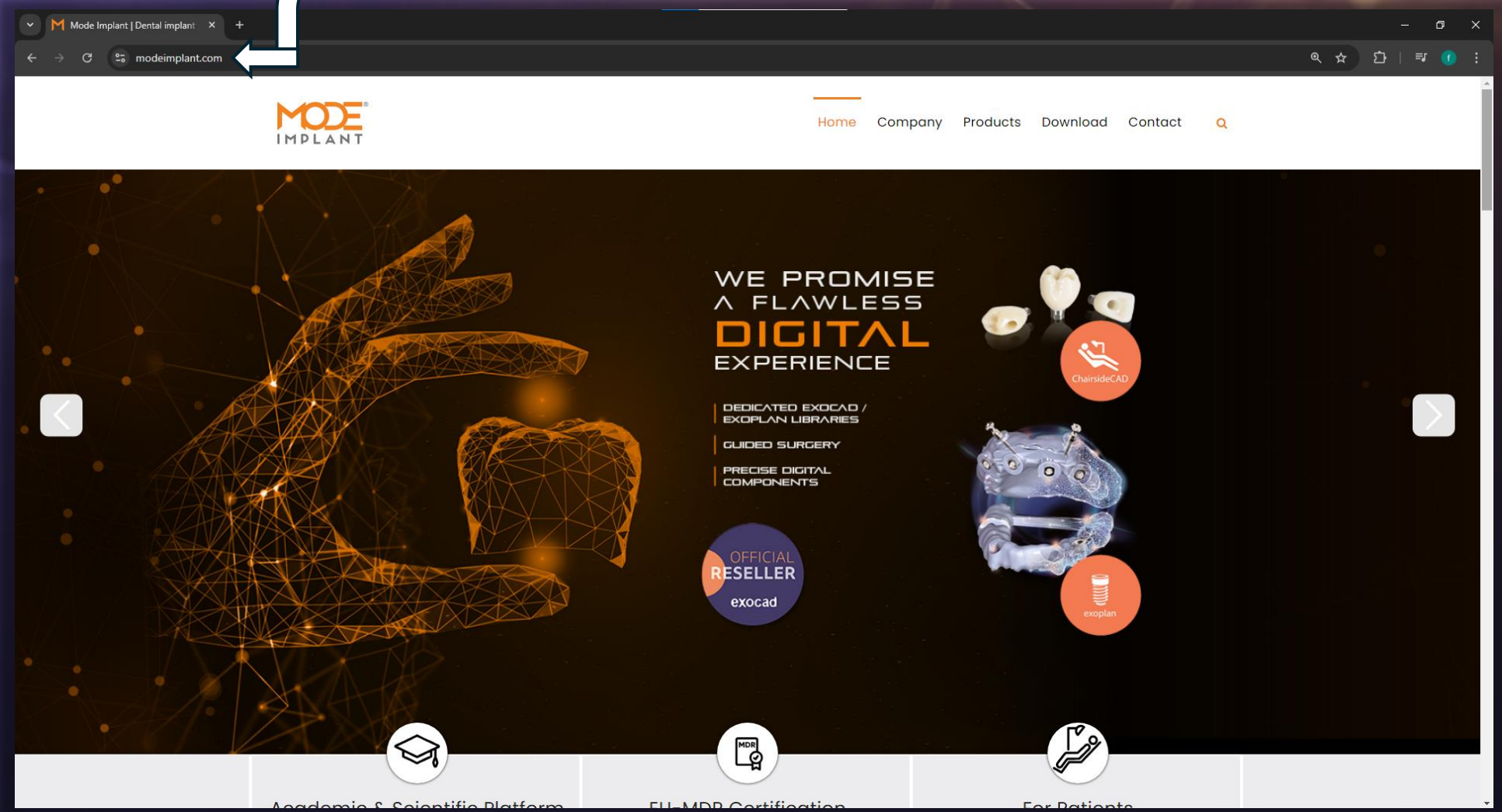

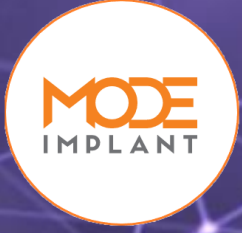

- Download kısmına geliniz ve CAD/CAM Libraries seçeneğine tıklayınız

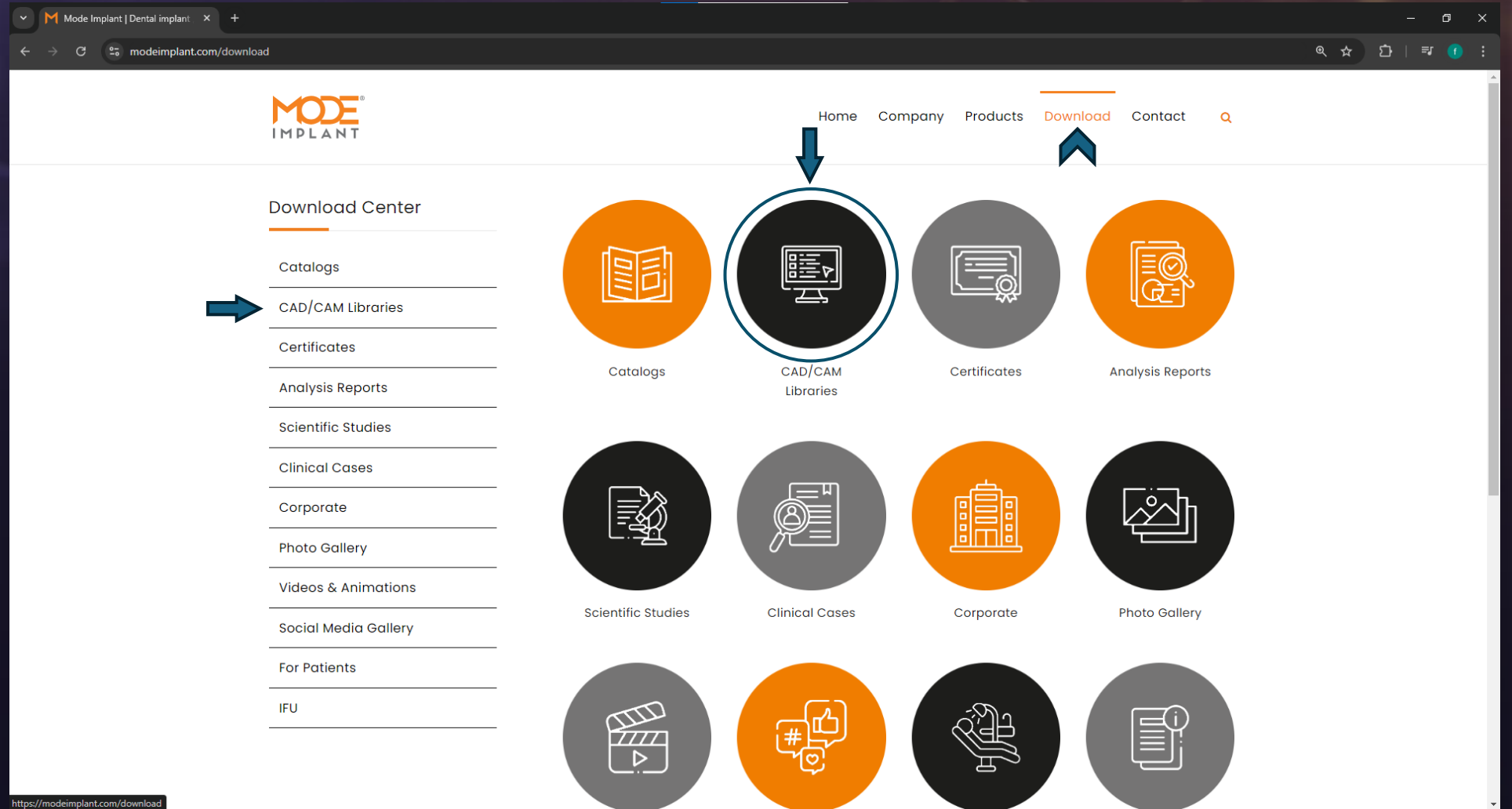

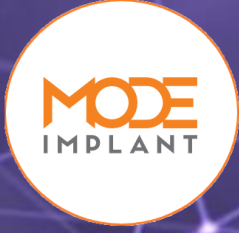

- İki şekilde kütüphaneyi indirebilirsiniz
- Exocad'ın resmi sitesinden veya Mode implantın resmi sitesinden

The screenshot shows the Mode Implant website's Download Center. The left sidebar lists various resources: Catalogs, CAD/CAM Libraries, Certificates, Analysis Reports, Scientific Studies, Clinical Cases, Corporate, Photo Gallery, Videos & Animations, Social Media Gallery, For Patients, and IFU. The main content area features two sections: 'EXOCAD Implant libraries for Dental CAD' and 'Mode Implant Libraries For Exoplan'. The Exocad section includes a promotional image for DentalCAD, a description of regularly updated official libraries for prosthetic components, and two download options: 'Download Library for DentalCAD (Lab Analogues)' and 'Download Library for ModelCreator (Digital Analogues)'. The Exoplan section includes a promotional image for Exoplan and a description of implant planning and surgical guide design software. Two callout boxes on the right side of the Exocad section point to the download links: 'Mode implant Resmi sitede yüklü kütüphane' and 'Exocad resmi site indirme linki'.

Download Center

- Catalogs
- CAD/CAM Libraries**
- Certificates
- Analysis Reports
- Scientific Studies
- Clinical Cases
- Corporate
- Photo Gallery
- Videos & Animations
- Social Media Gallery
- For Patients
- IFU

exocad

DentalCAD

Discover our globally renowned software solution for outstanding dental restoration designs - powered by passion, executed in excellence.

MODE IMPLANT

EXOCAD Implant libraries for Dental CAD

Regularly updated official libraries for prosthetic components such as Scanbodies, Titanium bases, Stock abutments, Multi-Units and direct-to-implant Interfaces as well as Lab analogues for DentalCAD, ChairsideCAD and Model Creator.

Download Library for DentalCAD (Lab Analogues)

Download Library for ModelCreator (Digital Analogues)

Exocad Web Site

<https://exocad.com/integration/dentalcad-library-integration> | Discover Exocad CAD Design PDF

Mode implant Resmi sitede yüklü kütüphane

Exocad resmi site indirme linki

MODE IMPLANT

exocad

Implant libraries for implant planning.

exoplan®DB


Mode Implant Libraries For Exoplan

Implant libraries for implant planning.

Discover our powerful implant planning and surgical guide design software exoplan – created to provide dental labs, dentists, implant specialists and surgeons with maximum flexibility. Based on the renowned exocad platform, exoplan guarantees a seamless digital workflow and the highest usability and performance.

Download **Mode Implant Exoplan Library**

<https://exocad.com/integration/dentalcad-library-integration>

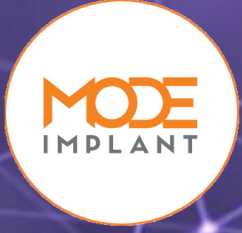


- İndirilenler kısmından indirmiş olduğumuz Kütüphaneyi zip dosyası formatında görüyoruz


The screenshot shows the Windows File Explorer interface for the 'İndirilenler' (Downloads) folder. The left sidebar shows the navigation pane with 'İndirilenler' selected. The main pane displays a table of files with columns for 'Ad' (Name), 'Değiştirme tarihi' (Date modified), 'Tür' (Type), and 'Boyut' (Size). The files are grouped by date, with 'Bugün (2)' (Today) showing two files.

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
Bugün (2)			
MOM_ModeMedical-IL-IO-exocad-libraries...	2.09.2024 10:44	WinRAR ZIP arşivi	13.951 KB
MOM_ModeMedical-Lab-Analog-exocad-libraries....	2.09.2024 10:44	WinRAR ZIP arşivi	4.100 KB
Geçen hafta (21)			
Geçen ay (50)			
Bu yılın başlarında (335)			
Çok uzun zaman önce (15)			





- Masa üstüne taşıdığımız zip dosyalarını klasöre ayıkla diyerek Zip dosyasından çıkartınız

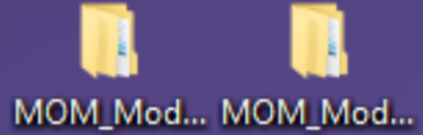

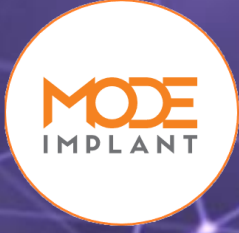


1


• Kütüphaneyi yükleyeceğimiz alanı açınız (C:\exocad-ChairsideCAD3.1\exocad-ChairsideCAD3.1\ChairsideCAD\library)

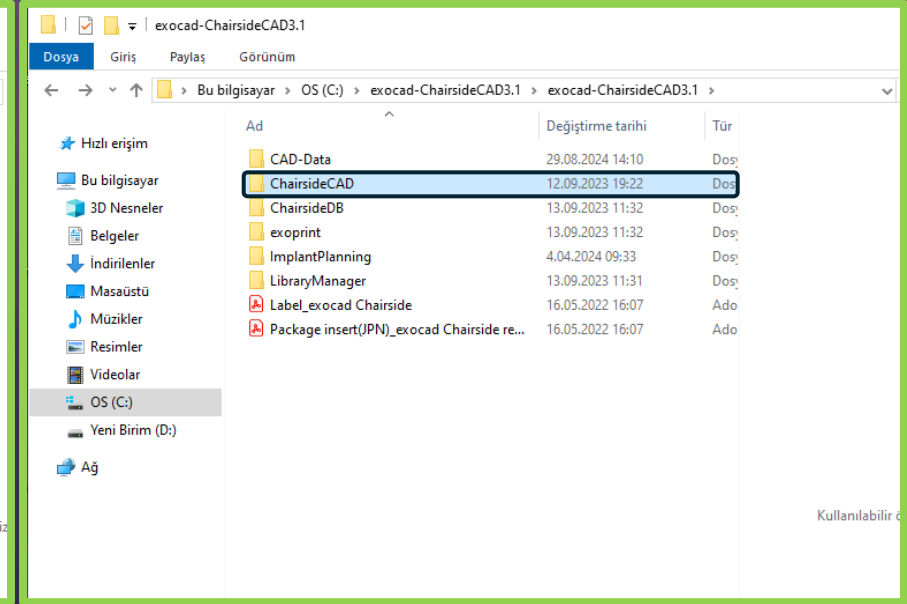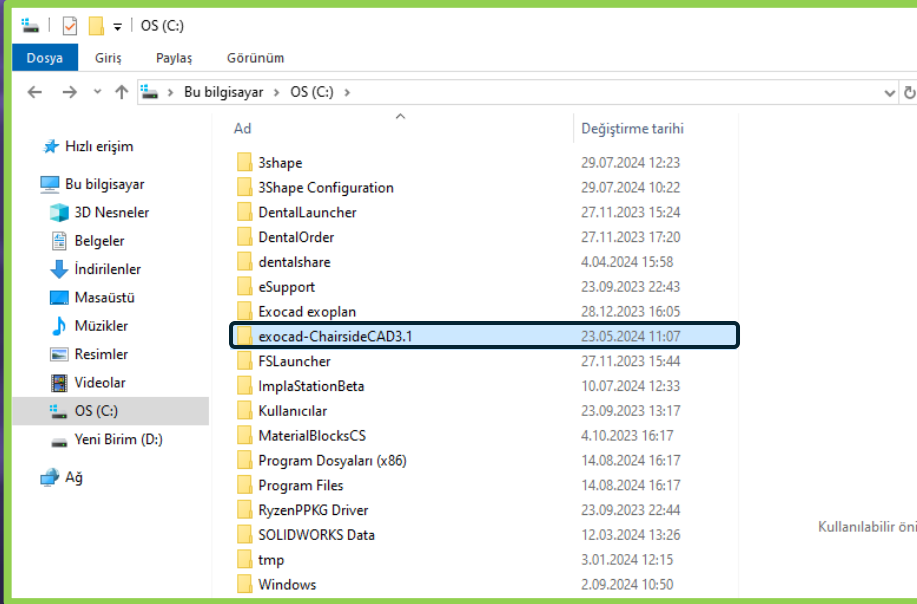


2

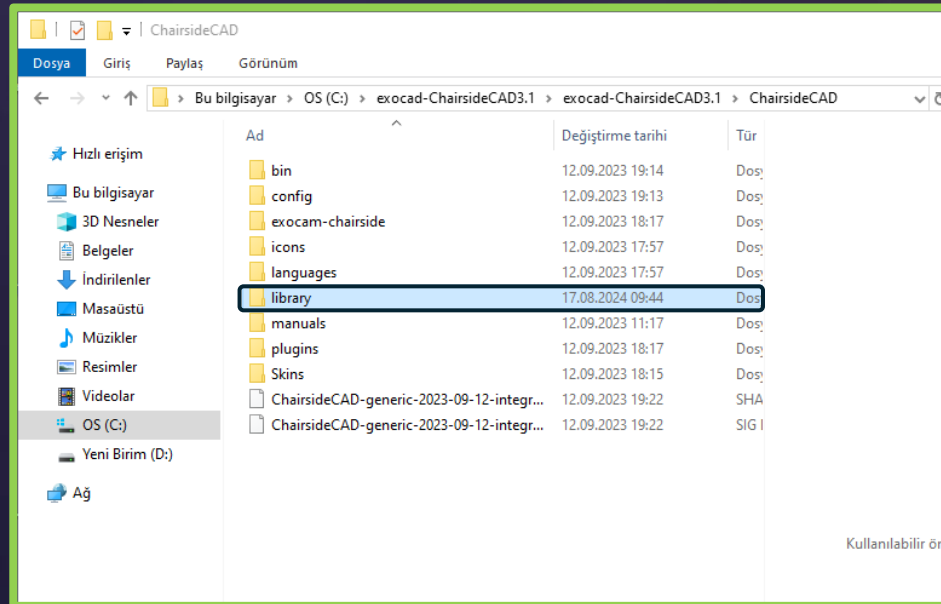

3

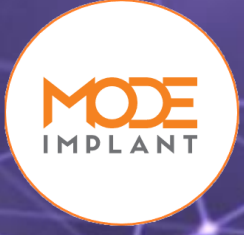



- İndirmiş olduğumuz kütüphane içinde iki farklı klasör bulunmakta bunlardan bir tanesi aşağıdaki görselde görünen. Üst yapıların, tarama bayrakların, vb ürünlerin olduğu klasör ve klasörün içine girdiğimizde bizi (implant/Mode_Implant) Klasörleri karşılıyor ve yükleyeceğimiz klasörün adı (Mode_Implant) klsörü

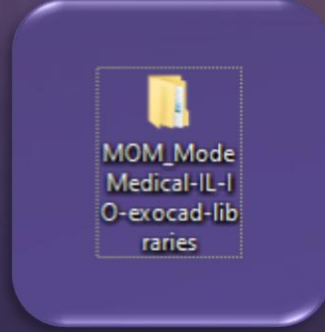


1

2

3

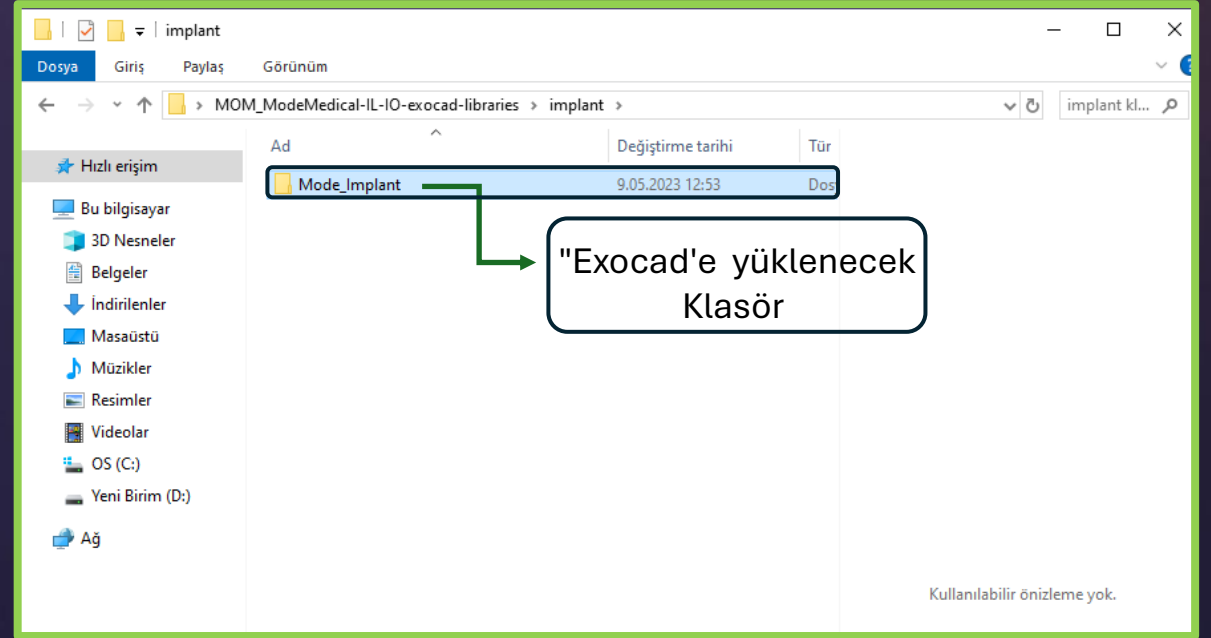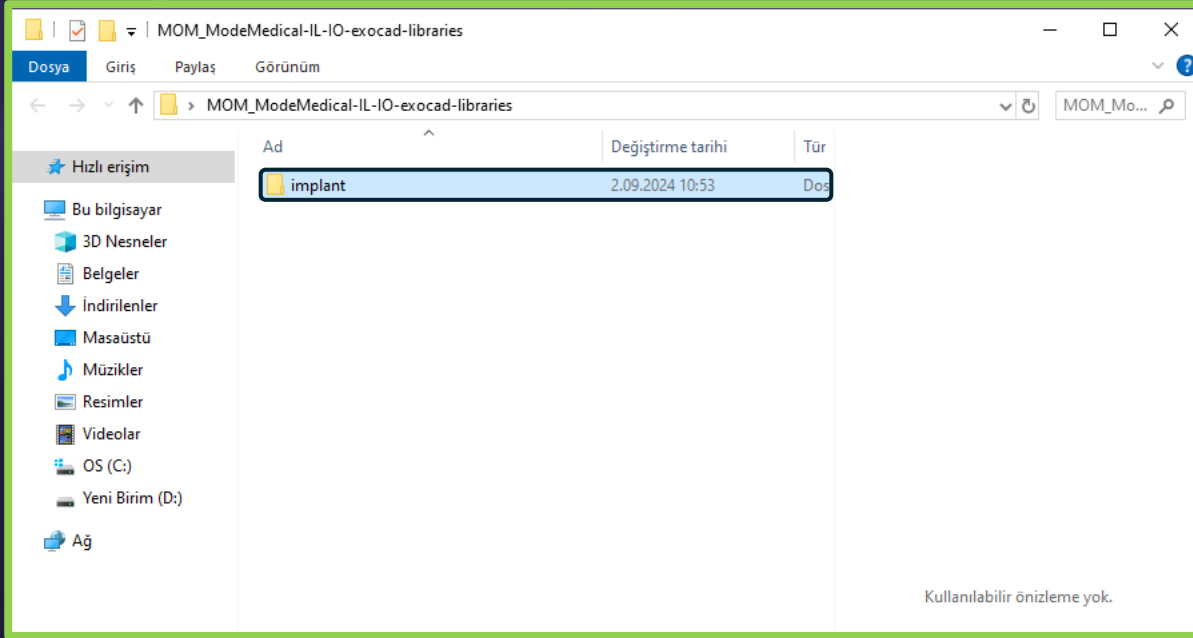


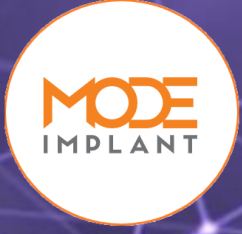

- (Mode_Implant) klasörünü kopyala yapıp yapıştıracağımız bölgeye (C:\exocad-ChairsideCAD3.1\exocad-ChairsideCAD3.1\ChairsideCAD\library\implant) Adresine yapıştırınız ve Üst yapıların, tarama bayrakların, vb ürünlerin olduğu klasörün yüklemesi tamamlamış bulunmaktayız.


1


İndirilen kütüphane (Üst yapıların, tarama bayrakların, vb ürünlerin olduğu klasör)

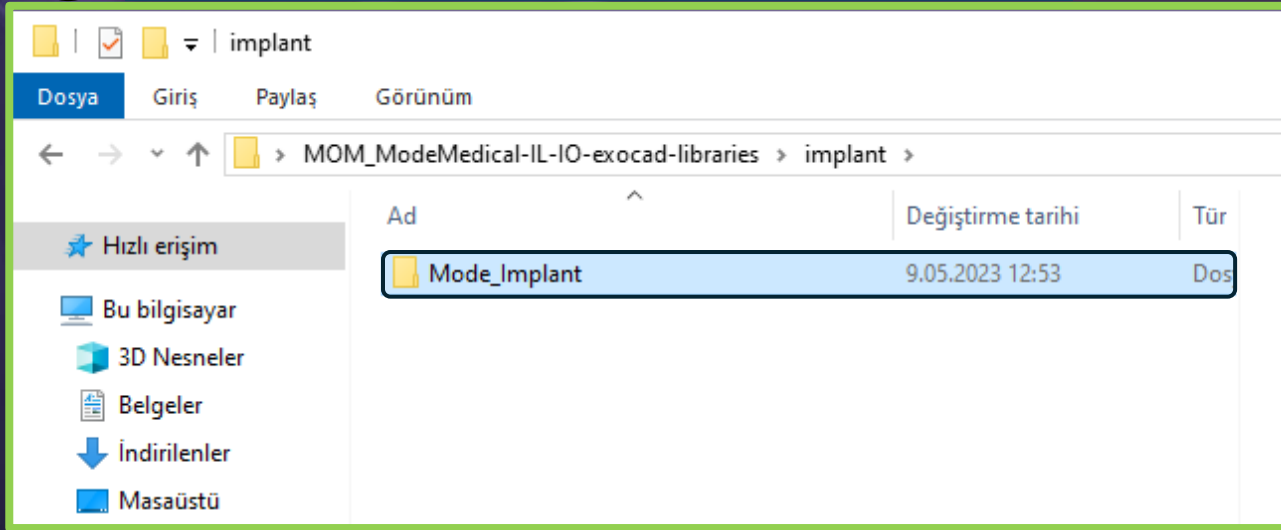


2

Yükleme alanı



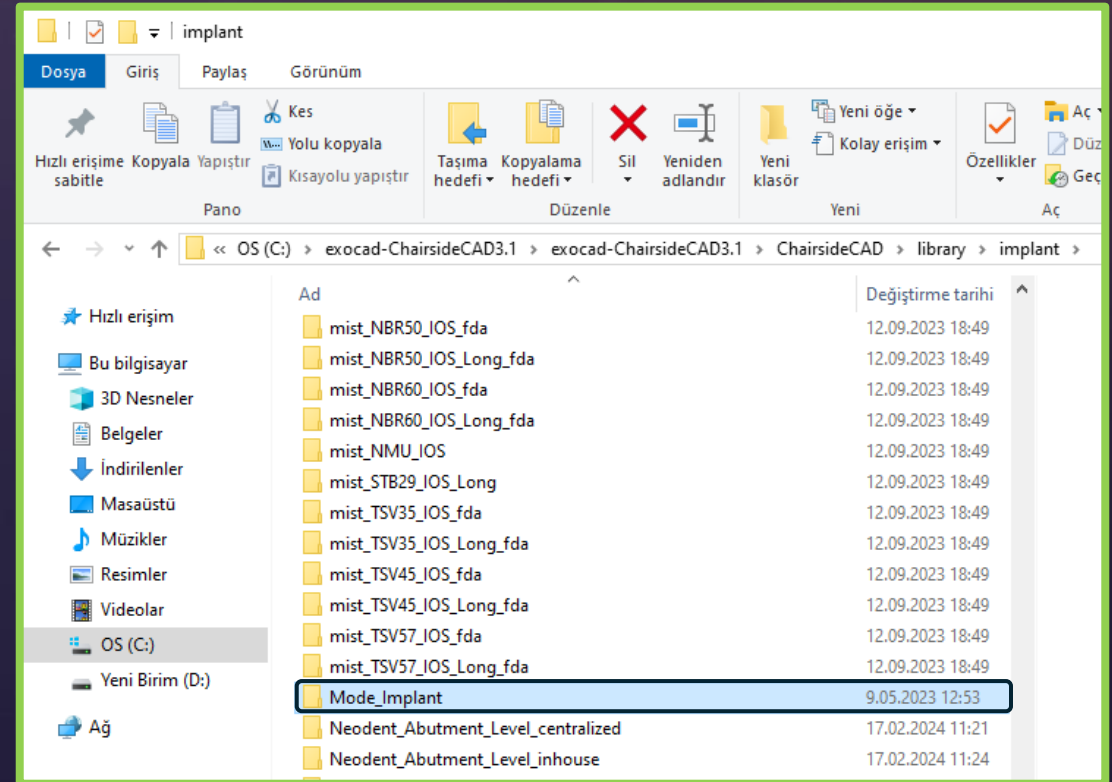


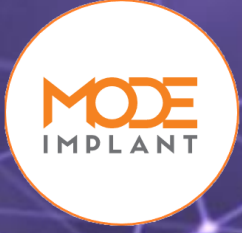


- İndirmiş olduğumuz kütüphane içinde iki farklı klasör bulunmakta bunlardan bir diğeri ise aşağıdaki görselde görünen. Dijital analogların olduğu klasör ve klasörün içine girdiğimizde bizi (modelcreator/implants/Mode_Implant) Klasörleri karşılıyor ve yükleyeceğimiz klasörün adı yine (Mode_Implant) klsörü

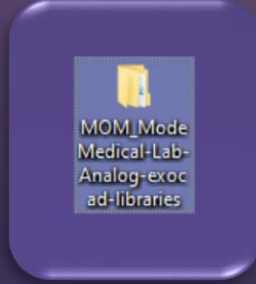

1

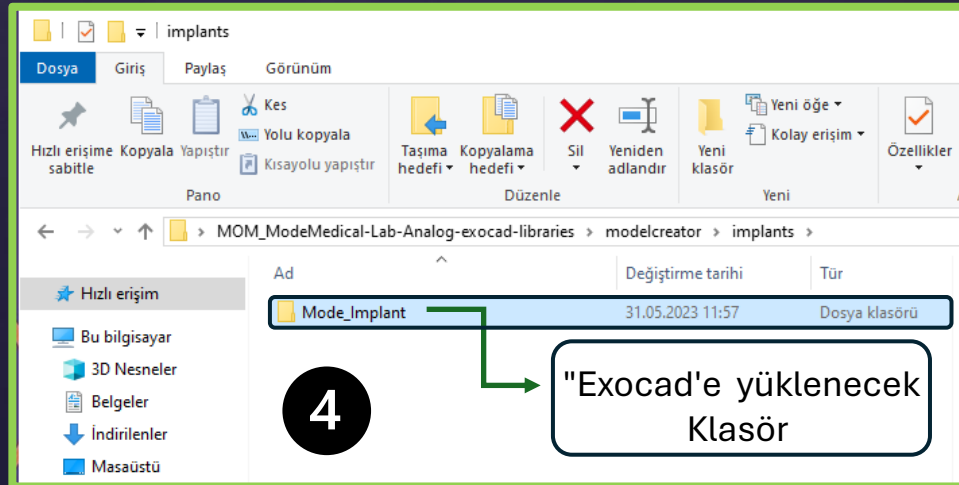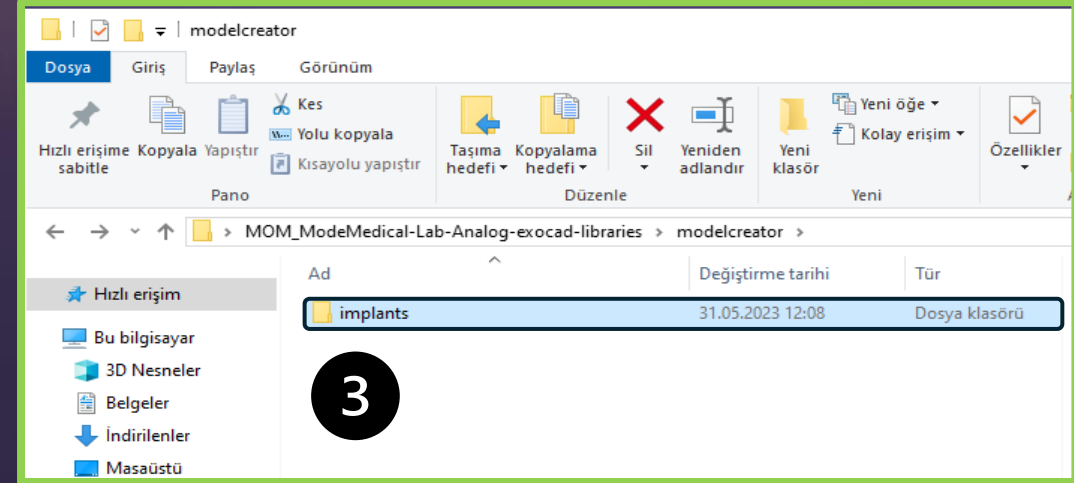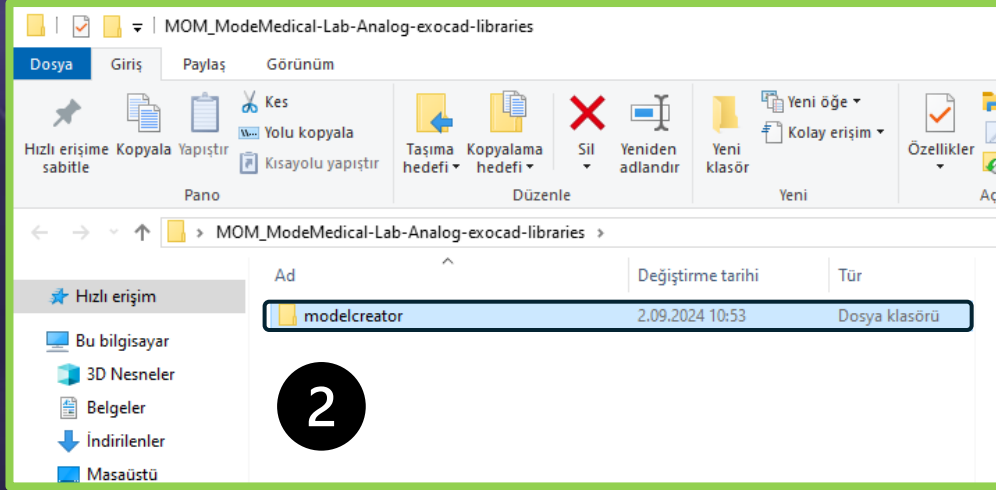


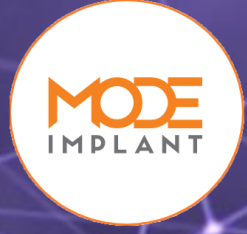

- (Mode_Implant) klasörünü kopyala yapıp yapıştıracağımız bölgeye C:\exocad-ChairsideCAD3.1\exocad-ChairsideCAD3.1\ChairsideCAD\library\modelcreator\implants Adresine yapıştırınız ve Dijital analogların olduğu klasörün yüklemesi tamamlamış oluyoruz


1


İndirilen kütüphane (Dijital analogların olduğu klasör)

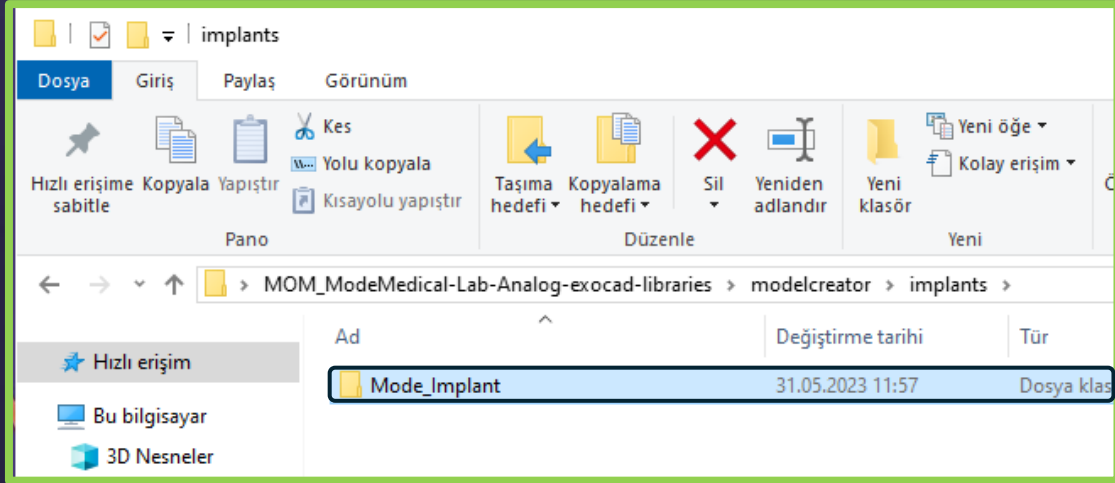

2

Yükleme alanı

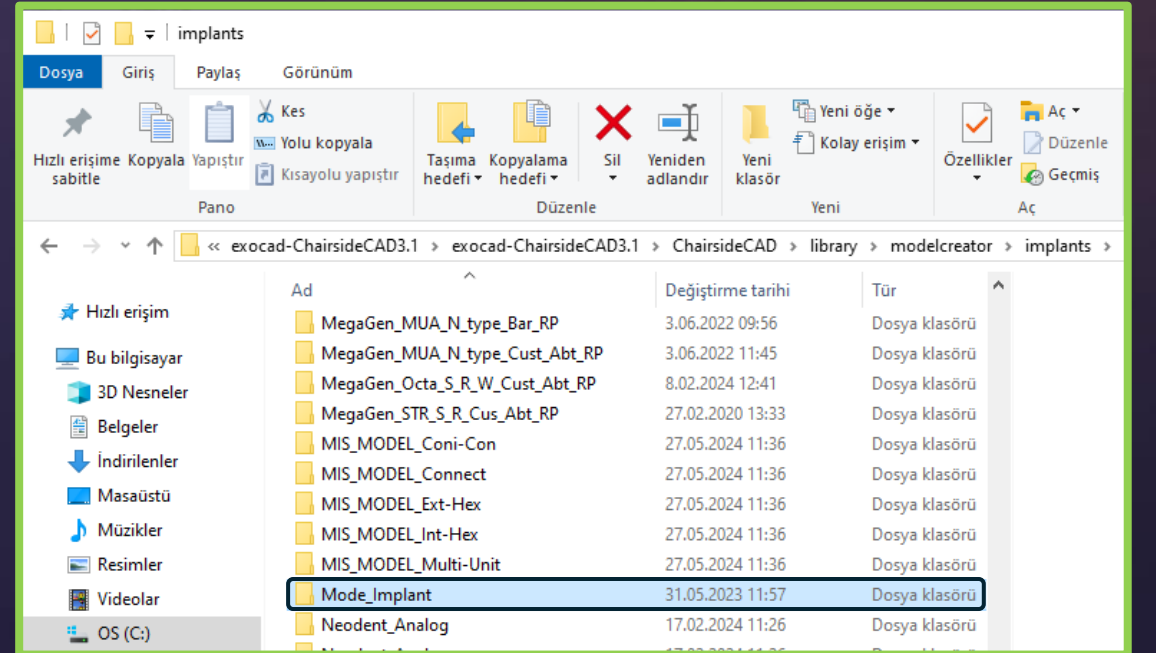

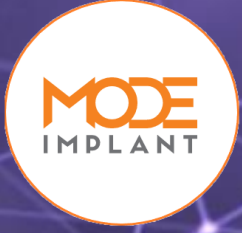

- **Dikkat edilmesi gereken noktalar**

indirmiş olduğumuz kütüphane içindeki klasörleri doğru konumlara yüklememiz gerekmektedir aksi takdirde Exocad de kütüphane açılmayacaktır. İyi çalışmalar dileriz.

WE PROMISE
A FLAWLESS
DIGITAL
EXPERIENCE

- DEDICATED EXOCAD / EXOPLAN LIBRARIES
- GUIDED SURGERY
- PRECISE DIGITAL COMPONENTS

OFFICIAL
RESELLER
exocad

ChairsideCAD

exoplan